

# TRUE-IPV™ THERAPY

*The Difference You Can Feel!!*

高頻度人工呼吸器用 呼吸回路セット

# ファジトロン® 5



## NEXT GENERATION

新しいIPV用呼吸回路セットは、同一患者様専用です。米国・パーカシヨネア社は、医療機関から頂いた課題に着目し、清潔かつ感染予防のためのIPV用呼吸回路セットを開発いたしました。

## IPV用呼吸回路セットの特徴

同一患者様専用回路

使用期間は、約6ヶ月間を目安

従来のIPV呼吸回路の使いやすい機能を踏襲

01

肺内  
パーカッション  
療法

02

高頻度陽圧  
換気療法

人工呼吸器  
IPV®

03

エロゾール  
吸入療法



IPV®-1C IPV 標準機種

- ・小児から成人まで使用可能
- ・毎分60~300回のパーカッションによる肺理学療法
- ・頻度に連動してパーカッション流の圧も変動



IPV®-2C IPV 上位機種

- ・未熟児、新生児から成人まで使用可能
- ・流量の調節が可能
- ・DAMAND CRAP 機能搭載
- ・I/e比を変えることが可能




インパルサー® IPV 在宅機種

- ・電源によるコンプレッサー内蔵
- ・IPV標準機種と同様の機能
- ※ この機種に限り電源が必要になります。





## 形状・構造及び各部名称

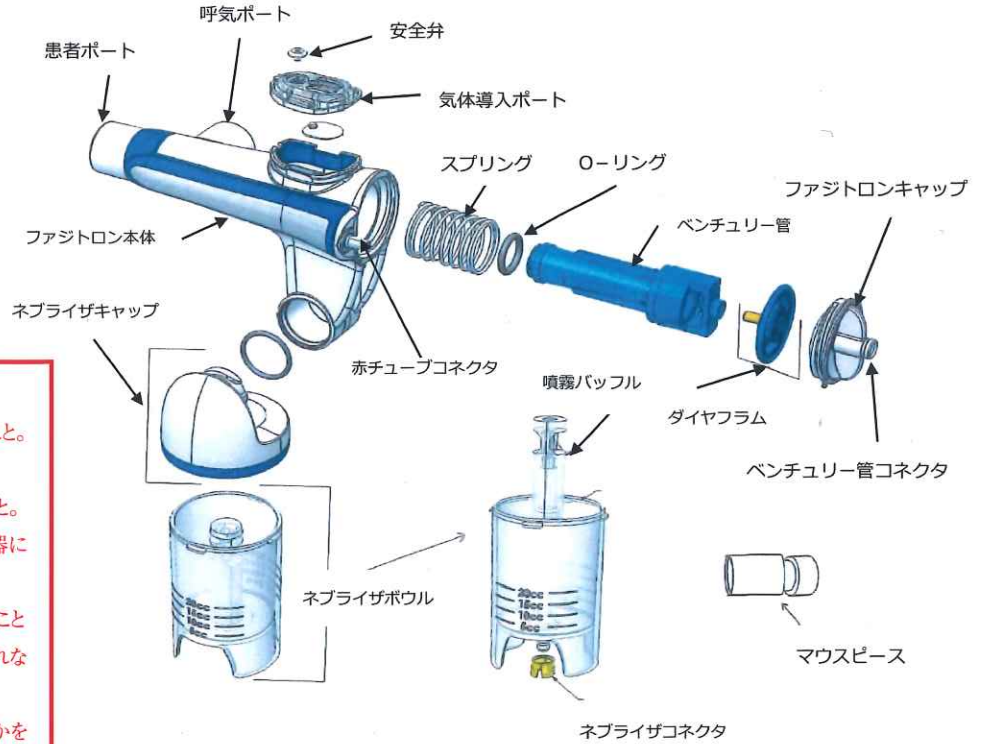

### 【警告】

1. 本品は同一患者に使用し、複数の患者には使用しないこと。  
[患者間の感染症を引き起こす可能性があるため]
2. 本品を他社・人工呼吸器の呼吸回路として使用しないこと。  
[インラインコネクタを使用せず、直接他社・人工呼吸器に接続した場合、故障の原因となるため]
3. 患者に装着する前に、回路が正しく組み立てられていることを確認すること。[リーク等により患者換気が正常に行われな  
いたため]
4. 治療の開始前に、ネブライザが正常に作動しているかを確認してください。[正常に作動していない場合は、気道  
の乾燥により炎症発生の可能性があります]

## 関連する診療保険点数

### 院内

人工呼吸(JO45)	30分まで	242点/日
	30分を越えて5時間まで	30分またはその端数を増すごとに 50点を加算
	5時間を越えた場合	819点/日

### 在宅

在宅人工呼吸指導管理料(C107)	2,800点/月
人工呼吸器加算(C164)	7,480点/月 (気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合)
	6,480点/月 (鼻マスク・顔マスクを介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合)

## ホームページのご紹介

パーカッションエア・ジャパンのホームページでは、さらに詳しい資料・データを公開しています。

URL: <http://www.percussionaire.jp/>

- 学会・セミナー情報
- 臨床文献要約整理表  
例)・周術期における効果  
・感染症に対する効果
- 勉強会資料 (IPV 原理、IPV 機構の説明資料)
- 取扱説明書
- 部品表

(2020年6月現在)

## 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売業者:

パーカッションエア・ジャパン株式会社  
〒108-0023  
東京都港区芝浦2丁目3番31号 第二高取ビル6階  
TEL:03-6722-6785 FAX:03-6722-6786  
第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X10251

製造業者:

パーカッションエア コーポレーション 米国  
(PERCUSSIONAIRE CORPORATION)

デモ用機器による勉強会も開催いたします。  
ご希望の場合は、メールまたはお電話でお気軽  
にお問い合わせください。

E-mail: [info@percussionaire.jp](mailto:info@percussionaire.jp)  
TEL: 03-6722-6785

販売代理店